



HTTP://WWW.ZIANN.CN

FOSHAN NANHAI
ZIANN MEDICAL APPARATUS CO., LTD.
佛山市南海区置安医疗器械有限公司

地 址：广东省佛山市南海区狮山穆院管理处"大𦨇岗"
A D D："Da Dang Gang"Management Office Muyuan Shishan Town,
Nanhai District,Foshan City,Guang Dong Of China.
销 售 部：+ (86) 757-86690872 86633087
传 真：+ (86) 757-86690873
售后服务：+ (86) 757-81208755
外贸部 (Export department)：+ (86) 757-81208757

2019 年 1 月编印
OUR COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY IMPROVEMENT ON PRODUCT DESIGN WITHOUT ADVACE NOTICE
本公司保留不予以事先通知而进行产品改良之权利
ALL PRODUCTS SUBJECT TO THE PRACTICALITY,THE PICTURES JUST FOR RDERENCE
图片仅供参考，以实物为准



服务热线：0757-86237234 1352899938
佛山市南海区置安医疗器械有限公司（南海）（南海）

ZIANN
FOSHAN NANHAI ZIANN MEDICAL APPARATUS CO., LTD

— MEDICAL APPARATUS —
志在精·安于稳



ABOUT US

关于置安

10⁺

制造经验

20⁺

专利产品

20⁺

认证证书



佛山市南海区置安医疗器械有限公司，坐落于中国·佛山——全球牙科综合治疗机核心生产基地。是一家通过ISO 9001: 2008、ISO 13485: 2003质量管理体系认证和CE0123认证的企业，集制造生产、销售服务于一体的专业牙科综合治疗机生产商。

历经10余年的征程，置安拥有规模化产能配套设施，自主厂房占地面积一万多平米，配备行业内最先进的高精密、高精度、高精度的机械化数字化设备，用领跑行业的前瞻思维，占领制造工艺的至高点。严格控制制造流程，只为制造出最贴切市场需求的综合治疗机。

Foshan Nanhai Ziann Medical Apparatus Co., Ltd. is located in Foshan, China, the core production base for universal dental units in the world. It is an enterprise recognized by ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003 quality management system certification and CE0123 certification, and is a professional manufacturer engaged in the production and sales service of universal dental units.

Over a decade of development, Ziann today has the large-scale production facilities, covers a factory area of more than 10,000m², and possesses the most advanced mechanical and digital equipment with high precision, accuracy and nicety in the industry. It occupies the high point of manufacturing process by its innovative thinking in the industry, and strictly controls the manufacturing flow to make the universal dental units that are most suitable for the market demands.



QUALIFICATION
AND HONOR
资质荣誉

To be famous in the world, to be honorable to vulgarity;The path to honor is paved with hardworking and sweat;Behind respect, it's trial and tribulation.
显名立于世，光荣著于俗；荣耀的道路是辛勤与汗水的堆叠；尊重的背后是艰辛的磨练。



医疗器械生产许可证



欧洲信息中心注册供应商



医疗器械注册证



医疗器械产品
出口销售证明书 (CFR)



ISO13485



CE



CE



企业法人营业执照



ISO9001

CORPORATE
PHILOSOPHY
企业理念

企业精神

诚信：立厂之根本 专业：时间的沉淀
细节：价值的所在 创新：未来的导航

公司愿景

致力成为全球牙科行业中值得信赖的企业

品质目标

成品合格率达到100%

经营理念

以质取胜，以质取信。坚持“说好不如做好，将完美的产品实惠的送到牙医朋友的手中！”的理念

品质管理

持续改进，追求卓越。对不合格品实行零容忍。

服务要求

坚持以客户为中心，态度诚恳，准时回复

ENTERPRISE SPIRIT

Sincerity: the foundation of incorporation;Professional: the accumulation of time;
Details: the embodiment of value;Innovation: the navigation of the future

VISION AND MISSION

To be a trustworthy manufacturer in the dental business in the world

QUALITY GOAL

Finished products pass rate: 100%

OPERATION CONCEPT

Win the market and the trust of customers with high quality. Insist on the principles of "producing high quality and affordable products to our dentist friends!"

QUALITY CONTROL

Keep improving, striving towards excellence. Zero tolerance of defective product.

SERVICE REQUIREMENTS

Insist on customer-centric business, treat customer cordially and give timely reply.

6



筑梦十余年 感谢有您

THANK YOU FOR TEN YEARS OF DREAM



致敬置安十年以上老员工

TRIBUTE TO TEN YEARS OLD STAFF



在置安成立的十来年中，从起初的三十几人，发展到一百多人，虽经过来来去去的家人朋友，依然有三十八位老员工，在自己的岗位上兢兢业业工作十余年。您们是置安产品的保障，置安人的财富，感谢有您！

During the past over ten years since its incorporation, Foshan Nanhai Ziann Medical Apparatus Co., Ltd. has developed from some 30 staff at the beginning to over 100 employees at present. In spite of friends and families coming and going, there are still over thirty old employees staying with us and working diligently and conscientiously for over ten years. You are the guarantee of Ziann products and the main assets of Ziann. Thank you for being with us!

ABOUT OUR TEAM 关于团队



PLANT
厂房



完美的生产过程，不仅仅在于我们拥有先进的生产工艺、设备和完善的检测手段，相比之下，我们更注重人才在此过程中所起的关键作用，技术专家和专业技术人员的
全程参与，使得我们产品在制造过程中具备了优异的品质，亦使置安医疗器械品牌更多了一份深厚的内涵。

Perfect production process, not only because we have advanced production technology, equipment and perfect testing means, by contrast, we pay more attention to the key role of personnel in the process, the full participation of
technical experts and professional and technical personnel, Making our products in the manufacturing process with excellent quality, but also to set the medical equipment brand more a profound connotation.

PRODUCTION
EQUIPMENT
生产设备

15⁺



大型激光切割机
Laser cutting machine



自动加工中心（一）
Automatic processing center



自动加工中心（二）
Automatic processing center



电路板检测
Circuit board detection



旋转电焊机
Revolving manipulator electrical welding



自动加工中心（四）
Automatic processing center



自动加工中心（五）
Automatic processing center



自动加工中心（六）
Automatic processing center



电路板制造
Circuit board manufacture



大型注塑机
Large-scale injection machine



电子加工中心
Electronic processing center



电子加工中心
Electronic processing center



阀门加工中心
Valve processing center



激光切割机
Laser cutting machine



半自动椅架组装
Semi-automatic chair unit assembly line




ZIANN Q8 DESIGN DIAGRAM >>

KEEP IMPROVING
EXCELLENCE
精益求精

精益求精，细节中打磨

重细节、重过程、重基础、重具体、重落实、重质量、重效果
讲究与专注地做好每一件事，在每一个细节上精益求精、力争最佳

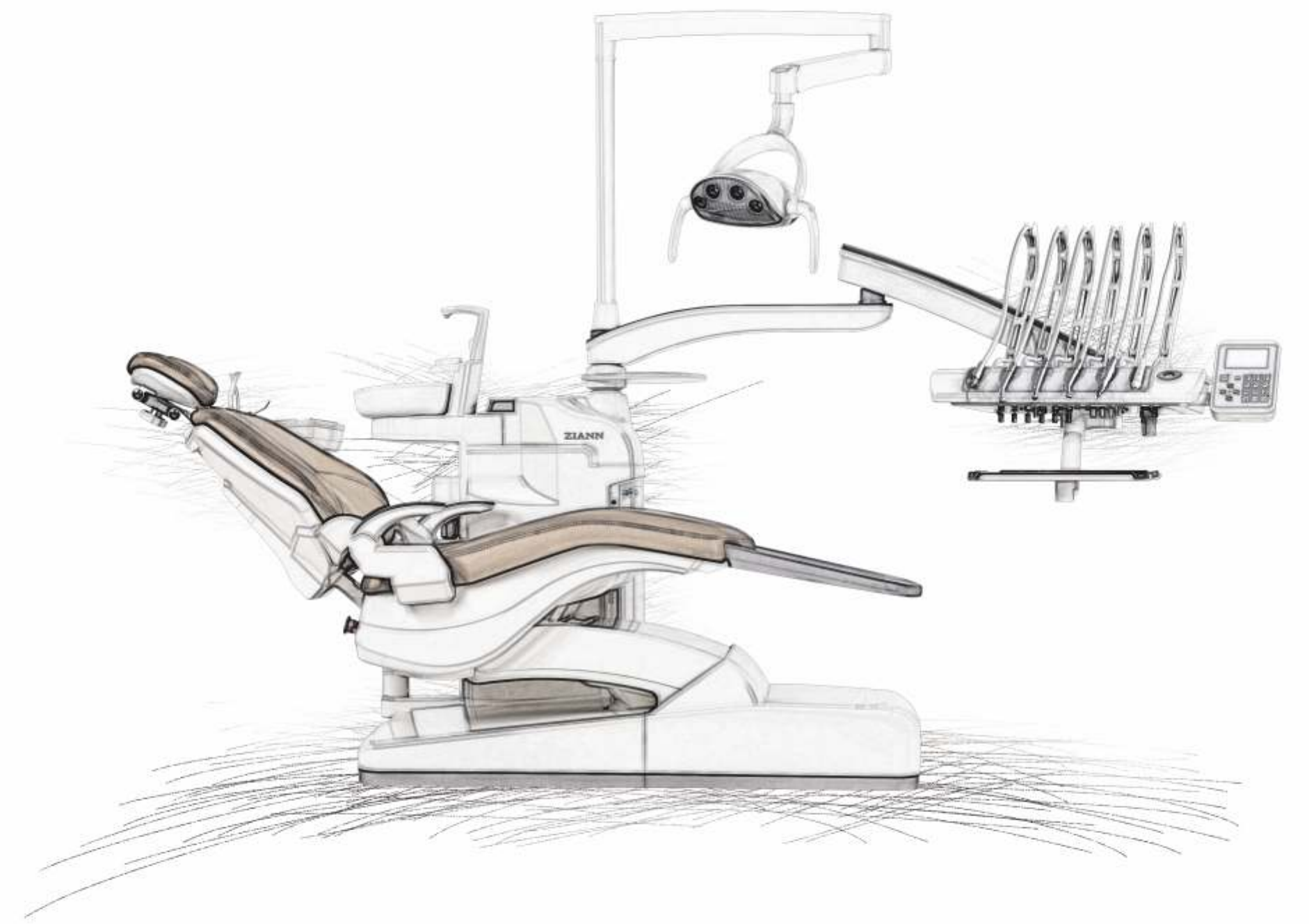

COMFORTABLE LUXURIOUS

舒适、奢华

最新一代椅架，更加舒适、奢华，适合稍长时间工作。落地式箱体让整机更加稳重，患者在治疗的同时更能感受到安心。
New generation compensation chair frame, more luxurious and comfortable, Suitable for long working hours, floor type cabinet make the dental unit more stable, and the patient will feel more secure



ZA-208Q8
置安-牙科综合治疗台




HIGH-END HUMANIZATION

高端人性化


最新一代椅架，高端人性化多功能设置，九个记忆椅位，满足三位医师根据习惯设置三个不同的专属记忆椅位，一键尽显关怀。

The latest generation of chair frame reflects the high-end humanized design and multi-functional settings. The seat cushion adapts to the body shape of the patient perfectly and allow the patient to stay in comfortable and relaxed position during the long-lasting procedures. It meets the needs of three doctors to set three different exclusive memory chairs according to their habits, showing care with one click.

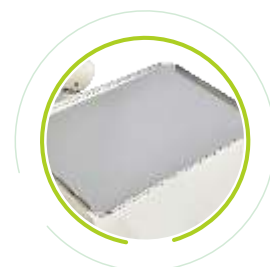

ZA-208Q6

置安-牙科综合治疗台

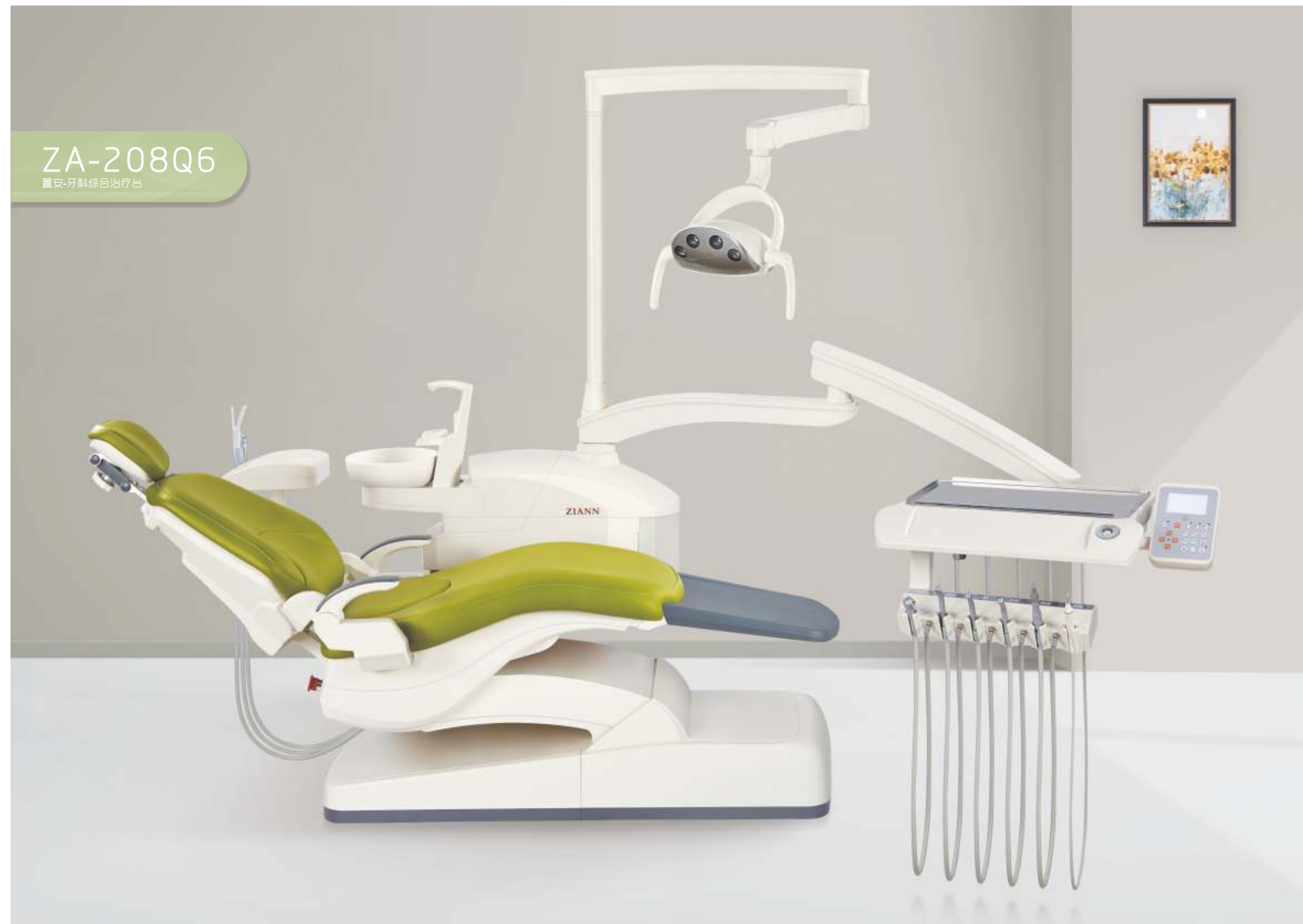



ZA-208Q5
置安-牙科综合治疗台



KEEP IMPROVING
ERGONOMIC DESIGN
人体工学设计



超舒适环保皮座垫，柔软耐磨、流线型箱体、氛围灯、一键吐痰专用记忆椅位、可拆卸痰盂盆等多项高档配置。

Super comfortable environment seat cushion, Soft and wear-resisting, The movable streamlined cabinet can be moved 45 degrees to the left, to provide for the new chair frame to make the cleaning more easily and efficiently after surgery. Blue led light on the cabinet looks more luxurious, Nine chair positions memory, one-touch spit key available, removable spittoon and more. High-end configuration

THE NEW-GENERATION
COMPENSATION CHAIR UNIT DESIGN
新一代补偿椅架设计



可选配超纤环保皮

最新一代椅架设计，补偿效果更佳。45度旋转箱体、安全急停开关、净水系统、高品质电机、电磁阀、进口食用级塑料水气管
The latest generation of chair frame design provides better compensation effect. The movable streamlined cabinet can be move 45degrees to the left, safety emergency stop switch can stop equipment during operating in any emergency situation, It provides water purification system, high quality motor, solenoid valve and imported edible plastic water pipe.



ZA-208Q3
置安-牙科综合治疗台




STREAMLINED FASHIONABLE 流线型与时尚性

流线型箱体可侧移45度，蓝色氛围灯，外置地箱带LOGO电源指示灯，水过滤、气、电一键保护功能，时尚且方便。

The movable streamlined cabinet can be moved 45 degrees to the left, to provide for the new chair frame to make the cleaning more easily and efficiently after surgery.
Blue led light on the cabinet looks more luxurious, Logo power indicator, and multiple functions including water filtration, gas and electric protection fashion and convenient.



潮流之星

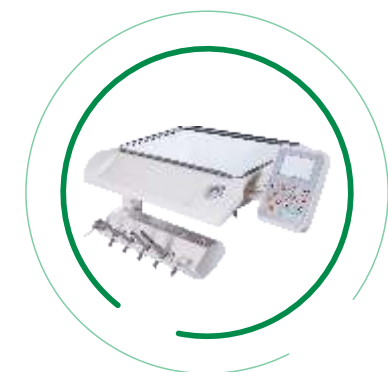


ZA-208Q2

置安-牙科综合治疗台



LET STRENGTH MAKE
DREAM COME TRUE

实力让梦想实现

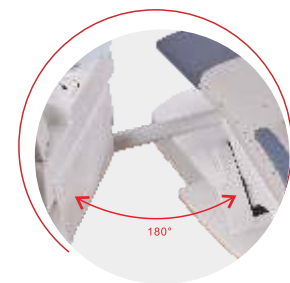

可左右手操作，配合第三代椅架，支持180度自左向右平衡旋转，即实用左手习惯医师，又可为开展种植提供更为宽敞位置。小车式移动器械盘，移动轻便。

It can be operated by the left hand and the right hand, with the support of the 3rd new generation chair frame, supporting side cabinet the 180 degree balance rotation from left to right, can offer more spacious position for developing planting. The combined mobile cart instrument tray is more easy to move and place.

ZA-208Q1

置安-牙科综合治疗台



SIMPLE
PROFESSIONAL
专业性与简便实用



为了迎合种椅市场，置安打造一款全新的种植专用牙椅，简便实用。不锈钢器械盘及不锈钢小推车移动器械盘，小车式器械盘可调节上下，专用口腔手术LED灯。

The Brand new za-208B dental chair for implantation is designed based on the through consideration of every design detail of the product, to facilitate the routine work of the dentist, simple and practical. Stainless doctor tray and stainless moveable handcart have independent up and down buttons. Medical 18led cold light source lamp for dental oral surgical.



ZA-208B(种植椅)
置安-牙科综合治疗台







提供九个记忆椅位，并加入一键吐痰椅位。座垫前端使用脚挡板，方便术后卫生清理。
可侧移箱体、移动式手机挂架。

Allows physicians to adjust the nine chair-positions memory, and have the one-touch spit key available. Foot baffle used in front end of seat cushion to make the cleaning easily and efficient after surgery; Horizontally movable streamlined cabinet can be move 45degrees to the left.

CONFIGURATION
HIGH-END RICH
配置高端丰富

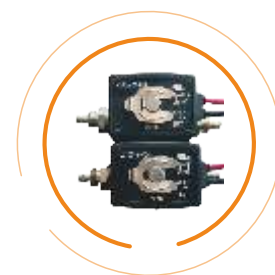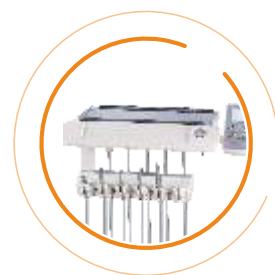

ZA-208E
置安-牙科综合治疗台



PROGRESS
INNOVATION
不断进步，不断创新

销量之星



多功能脚踏开关和四手操作助手台，提供了冲痰、供水、椅位升降、靠背仰合调节、吹屑气、手机水气转换开关等配置。可移动箱体、带LOGO电源指示灯，水过滤、气、电保护功能，一键总开关。

Multifunctional foot pedal and four hands work assistant tray, to control the wash of spittoon, water supply, blowing of dust, water and gas changeover switch of handpiece set up and down and backrest forward and backward. Moveable cabinet, Logo power indicator, and multiple functions including water filtration, gas and electric protection




ZA-208A
置安-牙科综合治疗台

SIMPLE PRACTICAL 简洁实用方便



三个记忆椅位，LED口腔灯，感应式弱光至强光的调节功能。纸巾盒和置物托盘，简洁实用方便。移动式手机挂架，间接保护手机和人体接触。
Allows physicians to adjust the three chair-positions memory. LED oral light provides the inductive low-to-high light level adjustment. The integrated build-in tissue box and shelf tray, making it more simple, practical and convenient. The movable handpiece hanger indirectly protects the contact between handpiece and human body.

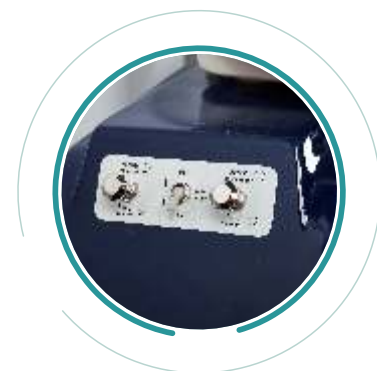

ZA-208D
置安-牙科综合治疗台



METICULOUS QUALITY

细致造就品质



精致之星

外置大号储水瓶，快速转换自来水。可拆卸痰盂盆，清洗方便卫生。前置器械盘气压表、多功能脚踏开关控制、外置脚踏带LOGO电源指示灯，水过滤、气、电保护功能，一键总开关。

Outside big Water bottle , exchange the pure water more easy ,Moveable spittoon ,easily cleaned and hygienic ,Front air-pressure gauge: adjust the air pressure as indicated ,Multifunctional foot pedal Logo power indicator, and multiple functions including water filtration ,gas and electric protection



ZA-208F

置安-牙科综合治疗台





SIMPLE
STYLISH
简约时尚风



LED口腔灯，注塑工艺箱体、塑料件、器械盘，结实耐用不变色，四手操作及小型助手盘。无缝型一次成形PU皮、可拆卸痰盂盆。

Adopts injection-molded process to make the plastic parts, strong and durable without discoloration. It provides led oral adjustable light, operable assistant control, detachable spittoon and seamless one-time forming pu leather process design.

ZA-208C

置安-牙科综合治疗台



佛山置安产品配置表

Product Configuration Table

配 置		型 号											
配置名称	CONFIGURATION NAME	208Q8	208Q6	208Q5	208Q3	208Q2	208Q1	208B	208E	208A	208D	208F	208C
24V直流电动椅	24V DC MOTOR CHAIR	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
下挂器械盘	DOWN MOUNTED INSTRUMENT TRAY	上挂式	○	○	○	○	移动	移动	○	○	○	○	○
三用枪（器械盘）热水	3-WAY SYRINGE(TRAY) HOT WATER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三用枪（助手架）冷水 热水	3-WAY SYRINGE(ASSISTANT) COLD WATER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主控制系统	MAIN CONTROL SYSTEM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
副手操作控制系统	ASSISTANT OPERATING CONTROL SYSTEM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
漱口加水加热系统	WATER HEATER SYSTEM	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○
强吸唾器	STRONG SUCTION TUBE	○	○	○	○	○	○	负压	○	○	○	○	○
弱吸唾器	WEAK SUCTION TUBE	○	○	○	○	○	○	负压	○	○	○	○	○
旋转式LED观片灯	MOVABLE LED VIEWER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
净水系统	WATER PURIFICATION SYSTEM	○	○	○	○	○	○	■	○	○	○	○	○
带气锁装置器械盘	AIR BRAKE INSTRUMENT TRAY	○	○	○	○	○	○	电动	○	○	○	○	○
安全急停开关	URGENCY SAFETY SWITCH ON/OFF	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
器械盘塑料保护膜	PROTECTIVE MAT OF INSTRUMENT TRAY	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冲痰供水定量给水设置系统	AUTO SPITTOON FLUSH AND CUP FILLER CONTROL SYSTEM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
可拆卸90度移动痰盂盆	DETACHABLE 90 MOVABLE SPITTOON	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机椅互锁	CHAIR WITH ITSELF LOCK FUNCTION	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多功能脚踏开关	MULTIFUNCITONAL FOOT CONTROLLER	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
一键吐痰位	KEYPRESS FUNCTION FOR SPITTING	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■
水、电、气总开关	CONTROL BOX WITH MAIN SWITCH(WATER,POWER, AIR)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED口腔灯	LED OPERATING LIGIHT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
操作状态显示屏	OPERATION STATUS DISPLAY	■	■	■	■	■	○	■	■	○	■	■	■
九个记忆椅位	9 MEMORIES	○	○	■	■	○	○	○	○	○	■	■	■
三个记忆椅位	3 MEMORIES	■	■	○	■	■	■	■	■	■	○	○	■
豪华医师转椅（带腰靠）	LUXURY DENTIST STOOL (W/BACKREST)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■
医师转椅（不锈钢脚）	DENTIST STOOL (STAINLESS STEEL FEET)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	○	○	○
搁物玻璃托盘	GLASS PLATE	○	■	■	○	■	○	■	○	○	○	■	■
可移动侧箱	MOVABLE CABINET	■	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■
玻璃盂盆	GLASS SPITTOON	■	■	■	○	■	○	○	○	○	○	○	○
陶瓷盂盆	CERAMIC SPITTOON	○	○	○	■	○	■	■	■	■	■	■	■
机椅联动补偿椅位	COMPENSATING CHAIR FRAME	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
高低速手机	HIGH /LOW SPEED HANDPIECE	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
光固化	CURING LIGHT	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
洁牙机	SCALER	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
内窥镜系统	ENDOSCOPE SYSTEM	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
上挂器械盘	UP MOUNTED INSTRUMENT TRAY	○	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
最新一代高档椅架系统(第四代)	THE LATEST GENERATION INTEGRAL CHAIR FRAME SYSTEM	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■
第三代椅架补偿系统	THE 3RD INTEGRAL CHAIR FRAME WITH GREATLY IMPROVED COMPENSATION FUNCTION	■	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○
豪华超纤环保皮	LUXURY MICRO-FIBER ENVIRONMENT LEATHER	○	○	○	✦	○	○	○	○	○	✦	✦	✦
铸铝箱体	CAST ALUMINUM CABINET	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■
水源单向阀（防回流功能）	WATER ONE-WAY VALVE (ANTI-BACKFLOW FUNCTION)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
不锈钢器械盘	STAINLESS STEEL INSTRUMENT TRAY	■	○	○	■	○	■	○	○	■	■	■	■

注：○ 为标准配置 ✦ 为可选择配置 ■ 为无此配置

佛山置安医疗器械专用

常见问题分析及排除方法

一、强弱吸不工作，弱吸使用一段时间后无力。

- 1. 管路连接有误；
 - 2. 管道被污物堵塞；
 - 3. 微动开关灵敏度不高，弹片被压坏或和挂架盒的孔位大小位置不对；
 - 4. 弱吸集污杯堵塞；
 - 5. 弱吸总阀被污物堵塞；
 - 6. 水源质量差导致管道堵塞；
- 排除办法：换掉无法修复零件，检查并修复线路；清洗弱吸总阀； 建议用户定期清洗集污杯（两周清洗一次），用三用枪吹洗后按原样装回，管内保持通畅。

二、治疗机设置功能紊乱

- 1. 主控线和电机线连接错误；
 - 2. 面膜或控制器损坏；
 - 3. 自动反向上开关坏掉或焊接错误；
 - 4. 脚踏开关坏掉；
- 排除办法：检查并接好线路，换面膜。

三、无急停反向上升功能

- 1. 急停开关坏掉；
- 2. 急停开关焊接位置有误；
- 3. 开关行程没有调节好；
- 4. 九芯转换头上的焊线位置有误。

四、冷光灯不亮或出现其它问题

- 1. 灯泡烧坏；
- 2. 对插接触不良，连接头处松动；
- 3. 公共线没有穿入受控继电器；
- 4. 活动连接处内部电线扭断（请勿抬起平衡臂）；
- 5. 冷光灯的反光膜脱落；

排除办法：换型号相同灯泡；关掉电源检查并接好对插；建议用户冷光灯片应该在常温下保养；以软质布轻擦，灯片反面不能擦，更换反光片。

五、热水杯不能加热或水温过高

- 1. 电源或线路不正常；
 - 2. 热水杯温控线的公共线接错；
 - 3. 温控器或热水杯的发热棒已坏；
 - 4. 控制面膜已坏；
 - 5. 治疗板控制热水杯继电器不工作；
 - 6. 感温器失控或控制不灵敏；
- 排除办法：检查并修复线路，换热水杯、面膜、继电器、感温器。

六、洁牙机不能正常工作

- 1. 检查洁牙机的工作电源；
- 2. 检查继电器（脚踏）线圈电源；
- 3. 检查继电器吸合断开情况有无电压输出；
- 4. 洁牙头没上紧，或因长时使用被震松，应在关机后用配备的板手上紧洁牙头；
- 5. 检查功率调节电位器是否太小，若太小顺时针调大即可；
- 6. 若有旋扭松动应将其上紧；
- 7. 洁牙机电磁阀坏掉，应换掉电磁阀。

七、光固化机灯不亮

- 1. 用万用表测量灯是否烧坏，若烧坏更换即可；
- 2. 检查光固化灯脚是否氧化，若氧化用刀片把氧化物清除即可；
- 3. 测量光固化灯的电源是否正常，经主扳输出的电压是否符合要求；
- 4. 检查保险管是否烧坏。

八、手机操作过程中水气出现间题

- 1. 管道问题；
- 2. 检查空气过滤减压阀气压表显示是否达到六公斤；
- 3. 检查水过滤器是否被污物堵塞，若有则要清洗过滤器；
- 4. 检查侧箱底部水源则切换的位置是否接反；
- 5. 检查脚踏开关是否接触不良。

九、管道问题

- 1. 设备使用时间久，磨擦或者挤压会导致水气管或手机管爆裂、断开硬化（注：手机清洗剂会导致手机外管硬化）；
- 2. 管道被污物堵塞，应定期清洗；
- 3. 出水不畅，检查排水管是否扭曲，压瘪；
- 4. 管道漏水漏气，检查管道漏水漏气处并更换；
- 5. 管道接口不紧或有松动则应重新将其接牢固。

十、电磁阀问题

- 1. 因用时过久导致电磁阀老化漏水漏气；
- 2. 进出水嘴接反；
- 3. 电磁阀接口处不牢固导致漏水漏气；
- 4. 电磁阀质量问题；
- 5. 水源质量差导致电磁阀堵塞。

十一、电路板问题

- 1. 电路板的短路：
 - (1) 对插插错；
 - (2) 电路板处潮湿部位长时间放电的余渣导致；
 - (3) 接线排螺丝松脱造成短路；
- 2. 对插不紧、松动或氧化导致电路无法正常工作

十二、储水瓶问题：

- 1. 因二公斤减压阀坏掉导致瓶内气压过高而爆裂；
- 2. 瓶内添加非蒸馏水；
- 3. 水路堵塞导致出水不畅；
- 4. 质量问题导致储水瓶耐压性能不好；
- 5. 储水瓶同自来水转换问题，当准备使用储水瓶水时，检查水源转换开关是否打开，总气开关是否打开。

Maint Enance

高速手机的保养

- 清洗：高速手机在工作当中会有碎屑残留内部，影响转速，工作后使用手机清洗剂清洗。

- 润滑：手机在工作中的转速达到 40 万 ---100 万转，润滑因此变得很重要。大工作量时每天需润滑一次（注：用手机清洗剂时，尽量不接触到手机管，避免手机管出现硬化现象）。

- 气压：工作手机的气压力应在 2 个压力 -3 个压力之间，新手机磨合使用阶段可控制在 2 个压力左右。

- 车针与手机：手机不装车针时尽量不能空转，这样会对手机损害较大。

牙椅的保养

- 直流电机（DC）椅子：直流电机以其安全的电压、低噪音等优越的性能占领了椅子电机的霸主地位。其原理是椅子升到最高位置是最大状态、靠背仰面最大是其放松状态！

- 润滑：牙椅还是机械机电一体化阶段，所以用半年左右润滑一下电机。（可用黄油涂抹伸缩处）

- PU 椅面：尽量避免病人的钥匙及其它利器划破。冬天使用前最好用温水擦拭一遍后投入工作。

- 口腔灯：灯臂是靠拉力弹簧控制，非工作情况下，尽量不要来回拉动灯头。

- 热水器：夏天时，可拨开箱体内部热水器开关（不知情况下可询问当地代理商）；冬天零下低温时，不工作后要吹走热水器内部水份，防止热水器在夜间超低温下冻裂。

牙椅的维护

- 断电：每日工作完后切记一定要断电。

- 排气：每日工作完后空压机气体排干净后关掉气门总开关。机器管道一直充气容易使气管加速老化、压力开关弹簧弹性减弱，直接影响工作气压等情况。

- 排污水：注意排污水，空气里含有水分，根据当地的空气温度情况，大概一个月左右排一次。

OFFER PRICE

产品价目表



ZA-208Q8
158000 元 / 台



ZA-208Q6
135000 元 / 台



ZA-208Q5
128000 元 / 台



ZA-208Q3
98000 元 / 台



ZA-208Q2
88000 元 / 台



ZA-208Q1
78000 元 / 台



ZA-208B
138000 元 / 台



ZA-208E
68000 元 / 台



ZA-208A
63000 元 / 台



ZA-208D
58000 元 / 台



ZA-208F
48000 元 / 台



ZA-208C
32800 元 / 台

COLOR

常用座垫颜色

注：由于印刷的关系，可能与实际产品的颜色有所差异，使用时请以本公司产品色卡为准。



01

天蓝
Sky Blue



02

浅蓝
Light Blue



03

深蓝
Dark Blue



04

亮银
Bright Silver



05

苹果绿
Apple Green




06

草绿
Grass Green



07

黄色
Yellow

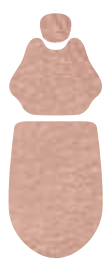

08

橙色
Orange



09

粉红色
Pink



10

象牙黄
Ivory



11

环保皮
中国红
Chinese Red



12

环保皮
玫瑰红
Rose



13

环保皮
翡翠绿
Emerald



14

环保皮
橙红色
Orange Red



15

环保皮
灰白色
Gray



16

环保皮
浅橙色
Light Orange



17

环保皮
浅绿
Light Green



内置式洁牙机
Built-in scaler



进口手机
Various imported handpieces



光固化机
Curing light



医生坐椅 C
Dentist stool C



医生坐椅 A
Dentist stool A



口腔内窥镜
Endoscope system



多功能圆形脚踏
Full-functional foot controller